


CAMERE DE NUMARAT

CAMERA DE NUMARAT NEUBAUER


- Pentru numararea leucocitelor, trombocitelor si eritrocitelor
- Adancimea camerei este de 0,1 mm
- Marimea unui patratel mare: 1 mm²
- Marimea unui patratel mic: 0,0025 mm²
- Gratarul de numarare are 9 patratele mari
- Patratelele din colturi sunt destinate numararii leucocitelor
- Patratul mare din centru este divizat in 16 grupuri de patratele

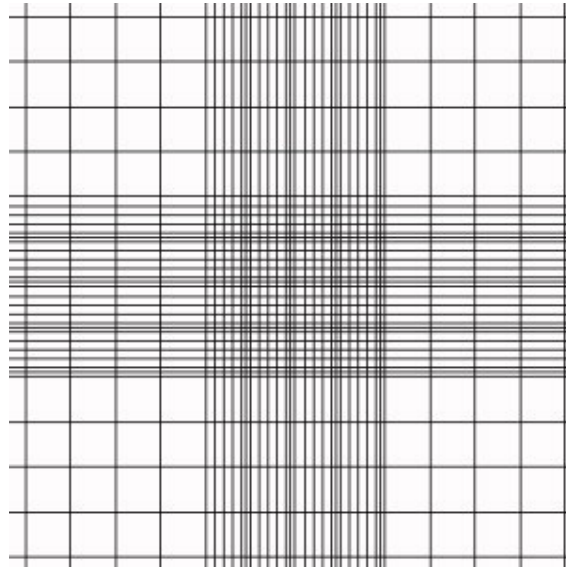

Cod	Produs	Mod de ambalare
CRSC3536.0001	Camera de numarar Neubauer	bucata

CAMERA DE NUMARAT NEUBAUER (CU LINII LUMINOASE)


- Are aceleasi caracteristici precum camera de numarar Neubauer
- Diferenta este data de baza camerelor, care sunt placate cu rodii
- Din acest motiv, gratarul de numarar va deveni luminos in momentul expunerii la microscop

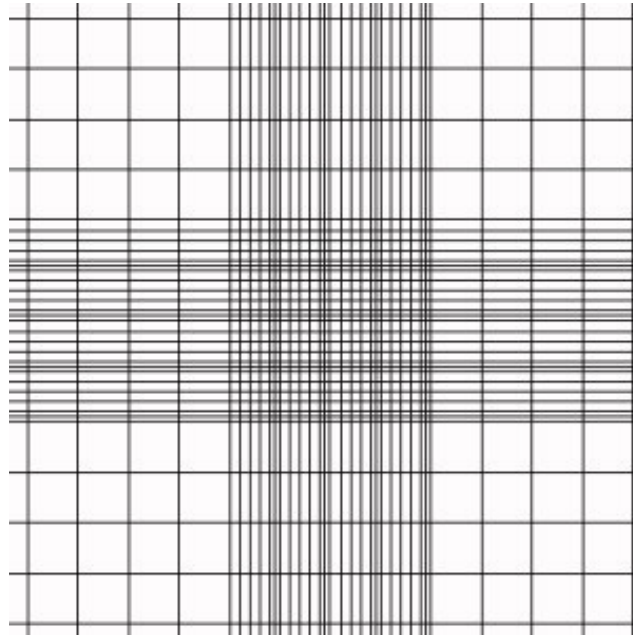

Cod	Produs	Mod de ambalare
CRPC3537.0001	Camera de numarar Neubauer (cu linii luminoase)	bucata

CAMERA DE NUMARAT NEUBAUER (IMBUNATATITA)


- Pentru numararea leucocitelor, trombocitelor si eritrocitelor
- Adancimea camerei este de 0,1 mm
- Marimea unui patratel mare: 1 mm²
- Marimea unui patratel mic: 0,0025 mm²
- Gratarul de numarare are 9 patratele mari
- Patratelele din colturi sunt destinate numararii leucocitelor
- Patratul mare din centru este divizat in 25 de grupuri de patratele, care la randul lor sunt impartite in 16 mini patratele
- Cinci grupuri de patratele sunt destinate numararii eritrocitelor (cele amplasate pe diagonala)

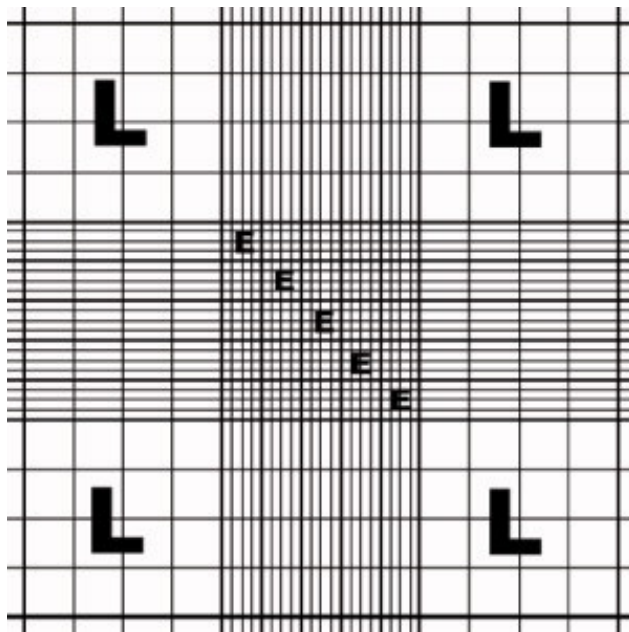

Cod	Produs	Mod de ambalare
CRTC3532.0001	Camera de numarat Neubauer (imbunatatita)	bucata

CAMERA DE NUMARAT NEUBAUER, IMBUNATATITA (CU LINII LUMINOASE)


- Are aceleasi caracteristici precum camera de numarat Neubauer (imbunatatita)
- Diferenta este data de baza camerelor, care sunt placate cu rodium
- Din acest motiv, gratarul de numarat va deveni luminos in momentul expunerii la microscop

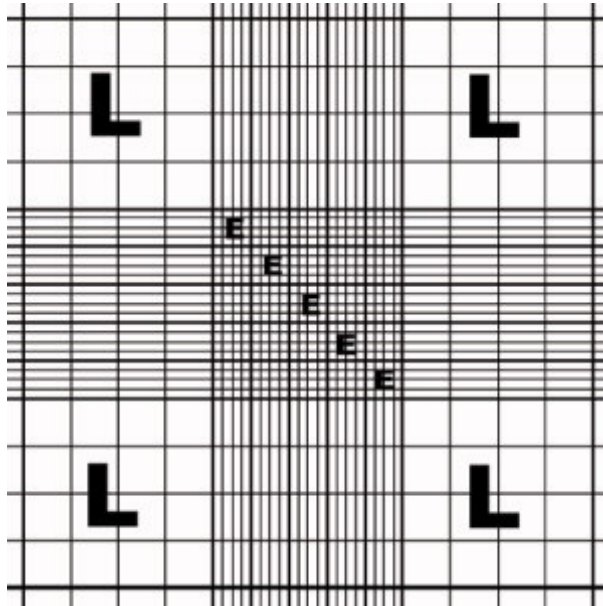

Cod	Produs	Mod de ambalare
CRMC3533.0001	Camera de numarat Neubauer imbunatatita (cu linii luminoase)	bucata

CAMERA DE NUMARAT THOMA


- Se preteaza pentru numararea trombocitelor si eritrocitelor
- Adancimea camerei este de 0,1 mm
- Marimea unui patratel mic: 0,0025 mm²
- Gratarul de numarat este impartit in 5 patratele mari (fara sectiuni in colturi)
- Sectiunea din centrul camerei este impartita in 16 grupuri de patrate, care la randul lor sunt divizate in 16 mini patratele

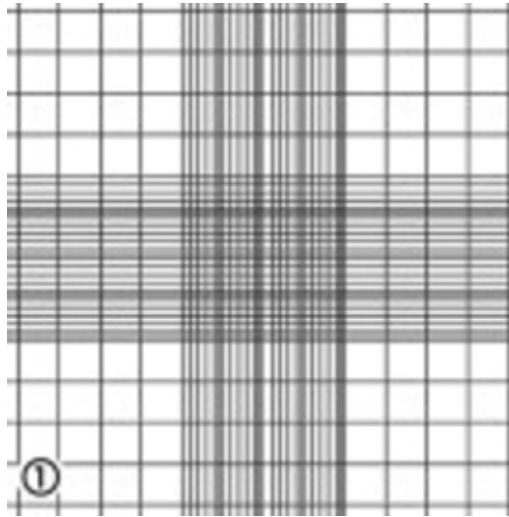

Cod	Produs	Mod de ambalare
CRZC3534.0001	Camera de numarar Thoma	bucata

CAMERA DE NUMARAT THOMA (NOUA)


- Are aceleasi caracteristici precum camera de numarar
- Diferenta este ca nu are liniile principale, trasate pana in colturi

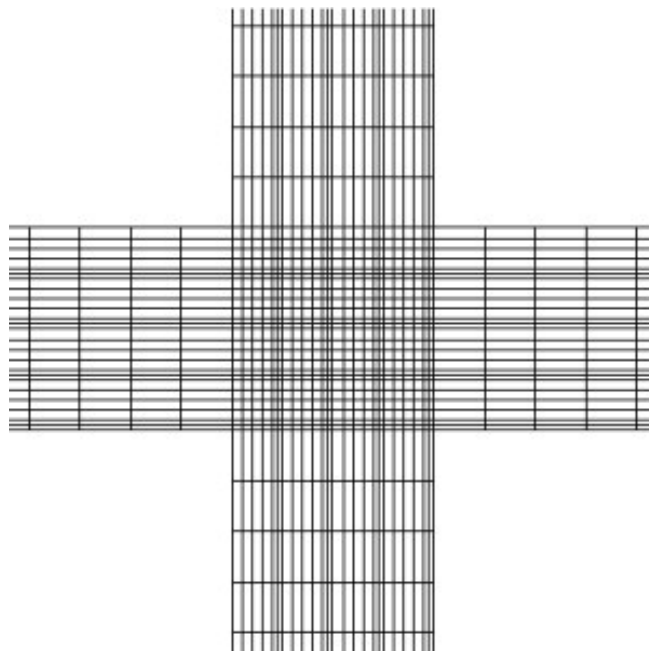

Cod	Produs	Mod de ambalare
CRBC3535.0001	Camera de numarar Thoma (noua)	bucata

CAMERA DE NUMARAT BURKNER


- Destinata numararii leucocitelor si eritrocitelor
- Adancimea camerei este de 0,1 mm
- Marimea patratelului mare este de 1 mm²
- Gratarul de numarare are 9 patratele mari, care sunt utilizate pentru numararea leucocitelor
- Fiecare patrat mai mare este divizat in 16 grupuri de patratele, destinate numararii eritrocitelor
- Cele 16 grupuri de patratele nu sunt divizate

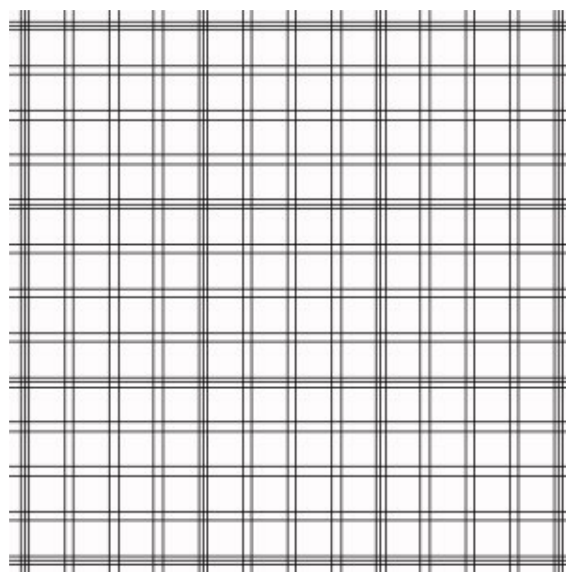

Cod	Produs	Mod de ambalare
CRHC3538.0001	Camera de numarar Burkner	bucata

CAMERA DE NUMARAT FUCHS – ROSENTHAL

- Pentru numararea celulelor in bauturi alcoolice
- Adancimea camerei este de 0,2 mm
- Suprafata totala este de 16 mm²
- Gratarul de numarare este impartit in 16 patratele mari

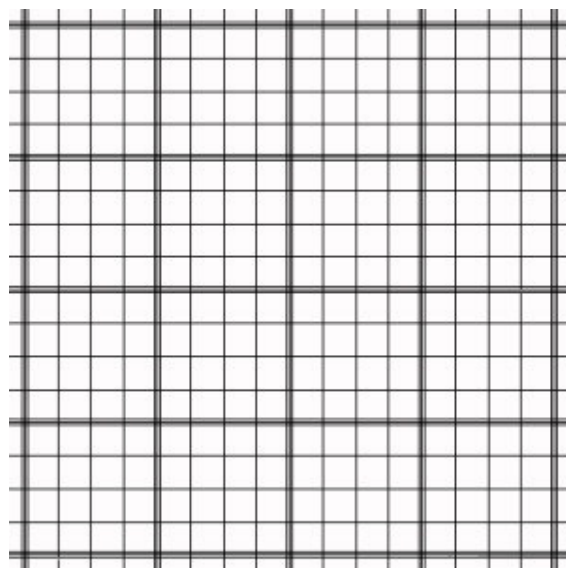

Cod	Produs	Mod de ambalare
CRXC3539.0001	Camera de numarar Fuchs - Rosenthal	bucata