


## PUNGI PENTRU MOSTRE

### PUNGI PENTRU MOSTRE

- Ideale pentru stocarea mostrelor lichide sau solide
- Confectionate din PE (polietilena), grosime 57  $\mu\text{m}$
- Sunt sterile
- Mod de utilizare:
  1. Pungile se deschid usor, prin simpla rupere a foliei de-a lungul partii perforate. Interiorul pungii este protejat impotriva contaminarii atata timp cat punga nu este folosita
  2. Cu ajutorul prelungirilor laterale, se deschide punga, fara a se realiza un contact cu interiorul acesteia. Punga va ramane deschisa in timpul umplerii
  3. Gatul larg al pungii face ca umplerea ei sa nu fie dificila. Se mentine in pozitia indicata si se umple aproximativ 2/3
  4. Punga se inchide prin tragerea "urechilor " exterioare
  5. Tineti punga la distanta si invariti-o de cel putin 3 ori
  6. Punga se inchide prin indoirea "urechilor"

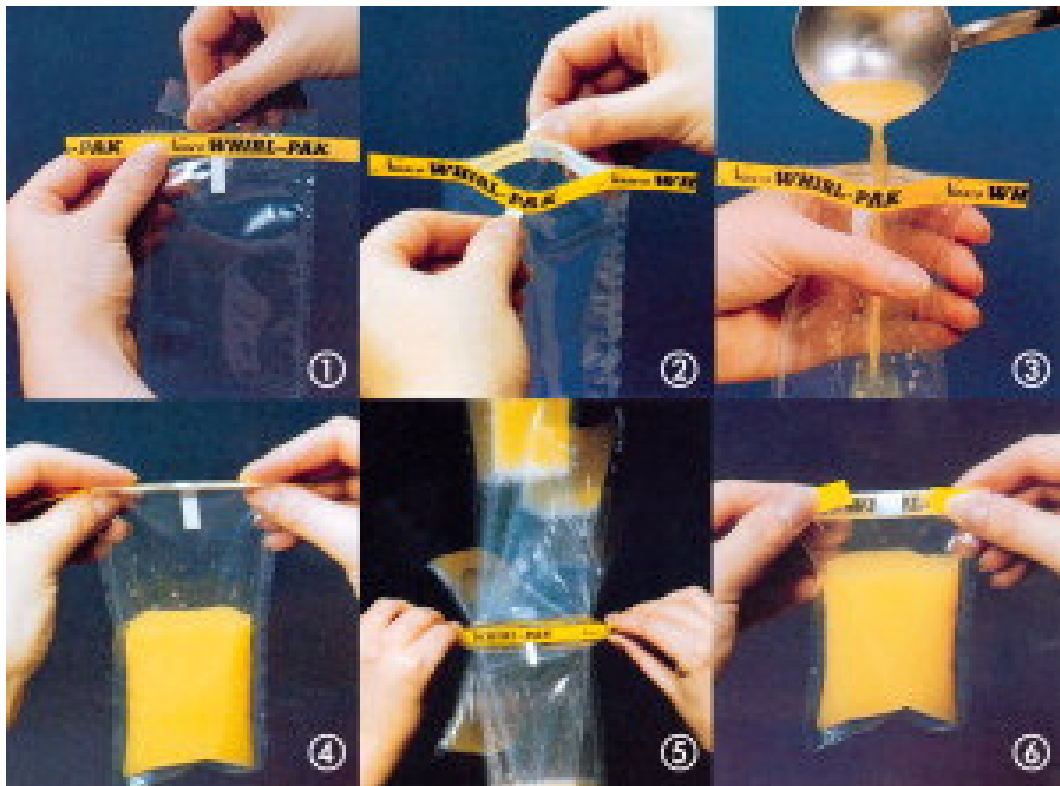

### Cu spatiu pentru etichetare

Cod	Produs	Volum (ml)	Volumul de umplere (ml)	Dimensiuni (l x h) mm	Mod de ambalare
PRTC4065.0500	Pungi pentru mostre	30	20	65 x 125	500 bucati
PRLC4066.0500	Pungi pentru mostre	60	40	75 x 125	500 bucati
PRHC4067.0500	Pungi pentru mostre	120	80	75 x 185	500 bucati
PRMC4068.0500	Pungi pentru mostre	540	360	115 x 230	500 bucati

### Fara spatiu pentru etichetare

Cod	Produs	Volum (ml)	Volumul de umplere (ml)	Dimensiuni (l x h) mm	Mod de ambalare
PRYC4069.0500	Pungi pentru mostre	120	80	75 x 185	500 bucati
PRLC4070.0500	Pungi pentru mostre	540	360	115 x 230	500 bucati
PRDC4071.0500	Pungi pentru mostre	720	480	150 x 230	500 bucati
PRFC4072.0500	Pungi pentru mostre	1080	720	125 x 380	500 bucati
PRGC4073.0500	Pungi pentru mostre	2070	1380	190 x 380	500 bucati

## PUNGI PENTRU MOSTRE

- Sunt de culoare neagra, pretandu-se pentru stocarea mostrelor (lichide sau solide) fotosensibile
- Pentru etichetare, au imprimata o zona de culoare alba
- Dimensiuni: 115 x 230 mm ( L x l); grosime: 64µm; volum 532 ml



Cod	Produs	Mod de ambalare
PRCC4074.0100	Pungi pentru mostre	100 bucati

## PUNGI PENTRU MOSTRE

- Prevazute cu o parte bazala de forma speciala, ce permite pungii sa aiba stabilitate verticala
- Sterile, confectionate din LDPE (polietilena de joasa densitate), grosime 64  $\mu\text{m}$
- Permit atat stocarea mostrelor solide, cat si lichide
- Dotate cu o zona larga de etichetare



Cod	Produs	Volum (ml)	Volumul de umplere (ml)	Dimensiuni (l x h) mm	Mod de ambalare
PRHC4075.0500	Pungi pentru mostre	120	80	75 x 185	500 bucati
PRGC4076.0500	Pungi pentru mostre	540	360	115 x 230	500 bucati